Cocoon Tentbed

Gebruikershandleiding



Versie 1.0 oktober 2026

CONCEPT

Copyright 2026

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Maak kennis met het Cocoon Tentbed

Hartelijk dank voor Uw aankoop van het Cocoon Tentbed!

Dit product biedt de cliënt en/of zorgverlener een medisch hulpmiddel om personen met een ziekte, letsel of beperking te ondersteunen.

Deze handleiding geldt voor alle in de handel verkrijgbare modellen.

- Verkrijgbaar in de afmeting 90x200x150 cm (inwendig).
- Mogelijke combinaties:

	Kleur				
Toegangspaneel	Blue Alpin	Victoria Blue	Hemp	Midnight Blue	Porcelain Green
Front	v	v	v	v	v
Front + Rear	v	v	v	v	v

- Beschikbare matras: Cocoon Tent matras
- In hoogte verstelbaar voor een goede transfer
- De handbediening kan worden vergrendeld/ontgrendeld met behulp van een contactloze sleutel (de LINAK Tag) die werkt op basis van magnetisme.
- Sterke vermindering van fysieke belasting voor zorgverleners.
- Veilige, individueel remmende zwenkwielen.
- Gemakkelijk te reinigen voor optimale hygiëne.

Deze gebruikershandleiding is bestemd voor zorgverleners. Meer productinformatie is te vinden op de website van de wettelijke fabrikant (Spring Produkties B.V.); zie "*Contactinformatie*".

Een getrainde servicetechnicus levert het Cocoon Tentbed volledig bedrijfsklaar af. Samen met de zorgverlener neemt de getrainde servicetechnicus de verschillende basishandelingen (procedures) en functies van de handbediening door.

Leesadvies



Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat het product in gebruik genomen wordt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een verhoogd risico op persoonlijk letsel of materiele schade, waaronder schade veroorzaakt door brand, elektrische schokken, brandwonden, beknelling en vallen. Spring Produkties en haar distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies in deze gebruikershandleiding..

Gebruik van de gebruikershandleiding

- Lees de gehele handleiding door, voorafgaand aan het gebruiken van het Cocoon Tentbed. Bewaar de gebruikershandleiding op een zodanig manier dat hij later is te raadplegen.
- Cursieve woorden en/of teksten in de kleur *blauw* tussen " " verwijzen naar een hoofdstuk of paragraaf.
- Volg nauwkeurig de instructies in deze gebruikershandleiding op en zorg ervoor dat alle waarschuwingen en instructies aangaande het Cocoon Tentbed worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan gevolgen hebben voor de garantie.
- Bij vragen over het veilige gebruik of onduidelijkheden ten aanzien van deze instructies; neem contact op met de distributeur van het Cocoon Tentbed.

CONCEPT

- Zorg ervoor dat de definities, symbolen en conventies van de documentatie goed zijn begrepen.
- Op verschillende plaatsen in de tekst wordt het ⚠ symbool gebruikt voor waarschuwingen en het ⚠ symbool voor let op's. Let alstublieft goed op de tekst.

⚠ *Technische werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een getrainde servicetechnicus. Neem contact op met de distributeur voor technische ondersteuning met betrekking tot het Cocoon Tentbed.*

CONCEPT

Waarschuwing/Let op overzicht

Wat een Waarschuwing (⚠) inhoud.
Een 'Waarschuwing' wordt gebruikt wanneer er een groot risico bestaat op ernstig letsel, overlijden of totale vernieling van eigendommen.

Wat een Let op (⚠) inhoud.
Een 'Let op' wordt gebruikt wanneer er een laag tot matig risico bestaat op lichte, herstelbare verwondingen of schade aan producten/apparatuur.

		Blz.
⚠	*Technische werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een getrainde servicetechnicus. Neem contact op met de distributeur voor technische ondersteuning met betrekking tot het Cocoon Tentbed.*	4
⚠	*Het gebruik van een infuus, katheter, sonde, drain en dergelijke is verboden.*	14
⚠	*Het gebruik van de Cocoon Tentbed wordt bepaald na multidisciplinair overleg tussen de behandelende professionals, rekening houdend met de wensen van de patiënt en zorgverlener, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.*	14
⚠	*Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos. Gebruik uitsluitend het standaard netsnoer.*	14
⚠	*Tijdens het bedienen van het Cocoon Tentbed mogen zich geen personen of huisdieren onder het bed of in de nabijheid van de bewegende delen van het Cocoon Tentbed bevinden.*	15
⚠	*Plaats het Cocoon Tentbed op enige afstand van muren, meubels en andere voorwerpen in de buurt, zodat de patiënt er niet mee in aanraking kan komen. Dit helpt het risico op letsel te verminderen en verkleint de kans dat het Cocoon Tentbed kantelt als de patiënt tegen de muur drukt.*	15
⚠	*Het netsnoer en de kabel van de handbediening mogen niet bekneld raken of knikken. Dit kan leiden tot beschadiging of storingen en kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken.*	15
⚠	*Warmte genererende producten zoals sigaretten, aanstekers, kaarsen, sfeerverlichting, wierookstokjes, felle gloeilampen en apparaten zoals strijkijzers en haardrogers zijn niet toegestaan in de Cocoon Tent.*	15
⚠	*Elektriciteit is niet toegestaan in de Cocoon Tent.*	15
⚠	*Scherpe nagels zijn niet toegestaan. Zowel aan de handen als de voeten. Verwijder elk scherp object uit de Cocoon Tent waarmee het tentdoek of het gaasdoek kan worden beschadigd.*	15

CONCEPT

	Blz.
Let erop dat er geen voet onder een stelpoot komt terwijl het Cocoon Tentbed naar beneden beweegt. Zie de afbeeldingen 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15 en 18.	15
Situatie zonder toezicht: *- Alle vier de zwenkwielen op de rem.* *- Toegangspaneel aan voor- en achterkant dichtgeritst en onderste schuiver met klikgesp vastgemaakt.* *- Het Cocoon Tentbed in de laagste stand.* *- De stelpoten staan dan op de grond en de zwenkwielen staan wat los van de grond.*	18
Situatie met toezicht: *- Het Cocoon Tentbed kan eventueel naar een andere positie worden verplaatst..* *- Alle vier de zwenkwielen op de rem.* *- Cocoon Tentbed op werkhoogte instellen.* *- Het toegangspaneel aan voor- en/of achterkant is met behulp van een klikgespen aan de Cocoon Tent bevestigd.*	18
Als een toegangspaneel open staat, moet er een zorgverlener aanwezig te zijn. *Tijdens het verplaatsen moet er een zorgverlener aan de kant van het geopende toegangspaneel staan.*	19
Aan het eind van een zorghandeling moet het toegangspaneel aan de voor- en/of achterkant worden gesloten en de onderste schuiver worden vastgezet! *Als er toch wordt besloten een toegangspaneel open te laten, doe dat dan alleen in de laagste stand van het bed. Als door de beweeglijkheid van de patiënt de mogelijkheid bestaat dat hij/zij uit bed rolt, leg dan een matras voor de open kant.* *Als er dan nog steeds gevaar bestaat, sluit dan het toegangspaneel en zet de onderste schuiver vast.*	27
Bij een matras vanaf een dikte van 8 cm zal de bovenkant van het matras gelijk, dan wel boven de ritssluiting van het toegangspaneel uitkomen. *De kans op uit bed vallen bij een open toegangspaneel is dan heel groot. Sluit daarom het toegangspaneel en zet de onderste schuiver vast.*	27
Het Cocoon Tentbed mag niet in een wasstraat en gebruik geen hogedrukspuit of stoomreiniger.	31
Schakel het systeem tijdens onderhoud uit. Tijdens onderhoud mag er niemand in de Cocoon Tent zijn	31
De maximale temperatuur waarmee het tentdoek en gaasdoek behandelt mag worden is 40°C.	31
Het is belangrijk dat een opgeleide servicetechnicus het systeem jaarlijks controleert en inspecteert. De staat van het systeem kan dan ook worden besproken, met advies voor de toekomst	32
Trek de stekker uit het stopcontact als de Cocoon Tentbed wordt verplaatst anders kan het netsnoer onherstelbaar beschadigd raken	32

CONCEPT

Inhoudsopgave

Maak kennis met het Cocoon Tentbed 3
Leesadvies 3
Gebruik van de gebruikershandleiding 3
Waarschuwing/Let op overzicht 5
Inhoudsopgave 7
Symbolen en definities 9
Productomschrijving 12
Beoogd doeleind (intended purpose) 12
Beoogde gebruikers (intended users) 12
Beoogde patiënten (intended patient population) 12
Beoogde gebruiksomgeving (intended use environment) 13
Indications 13
Contra-indicaties (contraindications) 13
Ingebruikname 14
Veiligheid 15
Veiligheid is belangrijk 15
Bediening van het Cocoon Tentbed 16
Bedieningstoetsen 17
Het gebruik van het Cocoon Tentbed 18
Basissituaties 18
Situatie zonder toezicht 18
Situatie met toezicht 18
De toegangspanelen, ritssluitingen, klikgespen en zwenkwielen 19
Werking toegangspaneel voorkant, rechts. 20
Werking toegangspaneel voorkant, links. 21
Werking toegangspaneel voorkant. 22
Werking zwenkwiel 23
Onderdelen benaming 24
Cocoon Tentbed zonder Cocoon Tent. 24
Cocoon Tentbed met Cocoon Tent 24
Cocoon Tentbed, zijkant, bodemplaat, rits tentframe. 25
Cocoon Tentbed, bovenaanzicht 26
Zorghandelingen 27
In en uit bed gaan 27
Aan- en uitkleden 27
Nachtrust (dagrust) 27
Afsluiten van een zorghandeling 27

CONCEPT

Uit bed rollen 27
Problemen oplossen 28
Onderhoud, controles, levensduur, garantie 29
Onderhoud 29
Controles 31
Levensduur 32
Garantie 32
Klachten en medische incidenten 32
Buiten bedrijf stellen 32
Technische specificaties 33
Mechanisch 33
Elektrische besturing 33
Motoren 33
Handbediening 33
Matras 33
Cocoon Tent materialen 34
Contactinformatie 35

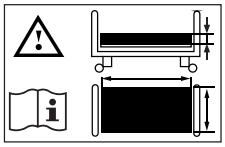
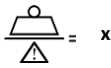
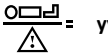
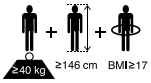
CONCEPT

Symbolen en definities

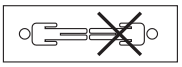
In deze gebruikershandleiding en op de productlabels worden symbolen gebruikt. De betekenis van deze symbolen wordt in onderstaande tabel uitgelegd.

Symbool	Titel	Beschrijving
	Raadpleeg de gebruikershandleiding	De gebruiker moet de gebruikershandleiding lezen en begrijpen alvorens het hulpmiddel te gebruiken.
	Let op	Een risico dat kan leiden tot licht letsel bij de patiënt
	Waarschuwing	Een veiligheidsrisico dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	CE-markering	Het medische hulpmiddel is in overeenstemming met de Europese regelgeving.
	Fabrikant	Naam, adres, plaats en telefoon van de fabrikant.
	Fabricagedatum	Dag, maand en jaar van de fabricage.
	Catalogusnummer	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Medisch hulpmiddel	Geeft aan dat dit artikel een medisch hulpmiddel is.
	Unieke hulpmiddel identificatie	Geeft de unieke identificatie van het medische hulpmiddel aan. UDI = UDI-DI + UDI-PI. Bestaat uit Application Identifiers (AI's). Gemaakte keuze: 01 Identificatie van handelsartikel (GTIN). 11 Fabricagedatum. 21 Serienummer.
	UDI-DI UDI-PI	UDI hulpmiddel informatie. - Identificatie van handelsartikel (GTIN). UDI fabricage informatie. - Fabricagedatum. - Serienummer.
	Serienummer	Serienummer van het product.
	Binnenshuis gebruiken	Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

CONCEPT

Symbool	Titel	Beschrijving
	Veiligheidsklasse II	Het apparaat is dubbel geïsoleerd.
	Met de patiënt in aanraking komend onderdeel van Type B	Ter identificatie van een met de patiënt in aanraking komend onderdeel van type B dat voldoet aan IEC 60601-1. Opmerking: B= Body.
	Matraseisen	De gebruiker moet de gebruikshandleiding lezen m.b.t. de eisen aan matraslengte, -breedte en -dikte, soort en dichtheid.
 xxx kg	Veilige WerkLast (VWL)	De veilige werklast van het bed is xxx kg.
 yyy kg	Maximale PatiëntGewicht (MPG)	Het maximale gewicht van een patiënt is yyy kg.
	Fysische kenmerken van een volwassene	Het medisch bed mag slechts worden gebruikt door volwassenen die voldoen aan alle getoonde criteria.
	Droog houden	Hulpmiddel droog houden (ook bij opslag); slechts reinigen met vochtig gemaakte schoonmaakmiddelen, niet onder stromend water reinigen, niet met hoge waterdruk reinigen.
	Aanduiding temperatuurbereik	Toegestane omgevingstemperatuurbereik tijdens opslag.
	Aanduiding luchtvochtigheidsbereik	Toegestane omgevingsluchtvochtigheid tijdens opslag.
Duty cycle [%] -[tijd]	Arbeidscyclus van hulpmiddelen	Duty cycle 10% - 2/18. Het apparaat mag maximaal 2 minuten AAN en moet dan 18 minuten UIT. Deze cyclus van 20 minuten totaal mag continu worden herhaald.
IPx6	Ingress Protection Rate x6 Waterbestendig	Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min.) onder welke hoek dan ook.
IPx4	Ingress Protection Rate x4 Plensdicht	Geen schade indien besproeid (10 l/min.) onder welke hoek dan ook.
	AEEA, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten. (De ontbrekende zwarte streep onder de kliko geeft aan dat het product geen zware metalen bevat zoals Hg, Cd, Pb).	Geeft aan dat de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist is. Volg de plaatselijke wet- en regelgeving.

CONCEPT

Symbool	Titel	Beschrijving
	Lichaamshouding	Geeft aan waar het hoofdeind en het voeteneind van het medische hulpmiddel is.
	Identificatie data van de patiënt	**A** geeft aan voor welke leeftijd van de patiënt het medisch hulpmiddel geschikt is. **A ≥ 3** betekend dat het medisch hulpmiddel geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar.
	Niet strijken	Om aan te geven dat strijken niet is toegestaan.
	Niet in de droogtrommel drogen.	Om aan te geven dat drogen in een droogtrommel niet is toegestaan.
	Niet bleken	Om aan te geven dat het bleken van het textielartikel niet is toegestaan.
	Niet wassen	Om aan te geven dat het textiel tijdens het reinigingsproces niet mag worden gewassen.
	Normaal handwassen, maximaal 40°C	Om aan te geven dat het textiel uitsluitend met de hand mag worden gewassen.
	Gemachtigde	Geeft gemachtigde in het genoemde land of rechtsgebied aan. XX = Afkorting van het land Bijv. XX = VK = Verenigd Koninkrijk

CONCEPT

Productomschrijving

Het Cocoon Tentbed is een elektrisch verstelbaar, gesloten MatrasSupportPlatform (MSP) waarop een rechthoekig frame met een tent is gemonteerd. De ruimte tussen het rechthoekige frame en de Cocoon Tent heeft een schuimvulling. Het MSP is in hoogte verstelbaar. Hoofd Naar Beneden Kantelen en Voet Naar Beneden Kantelen is een optie.

De Cocoon Tent kan alleen van buitenaf worden gesloten en geopend met een ritssluiting in het voorpaneel en indien aanwezig het achterpaneel. De ritssluiting kan worden vergrendeld door de klikgesp aan de schuiver. In de Cocoon Tent moet een passend matras worden geplaatst.

Het Cocoon Tentbed bestaat uit 4 delen: het onderstel (inclusief de electronica), het tentframe, de Cocoon Tent en het matras. Het Cocoon Tentbed heeft 4 zwenkwielen die afzonderlijk kunnen worden vergrendeld. Het MatrasSupportPlatform heeft in elke hoek een vooraf ingestelde stelpoot waardoor in de laagste positie een betere stabiliteit wordt verkregen in situaties met een dynamische persoon.

Beoogd doeleind (intended purpose)

Het Cocoon Tentbed is bedoeld om vallen, verwonding of ongewenst verlaten van het bed te voorkomen bij personen met een verhoogd valrisico, door een veilige, prikkelarme omgeving te creëren die de veiligheid en het comfort van risicopatiënten vergroot. Andere maatregelen, zoals kalmerende middelen of directe fysieke fixatie, kunnen hierdoor worden beperkt.

Beoogde gebruikers (intended users)

Medische professionals, verzorgers.

Beoogde patiënten (intended patient population)

- Personen van 3 jaar en ouder
- Volwassenen:
  Personen op geriatrie, psychiatrie, neurologie, revalidatie, orthopedie, oncologie, stroke units, verpleeghuizen, GGZ-instellingen, kinderafdelingen en verstandelijk gehandicaptenzorg.
  - > Bij algehele onrust, angst, agressie, wanen en hallucinaties.
  - > Als weglopen, dwalen of uit bed vallen moet worden voorkomen.
  - > Bij moeite met directe fysieke fixatie (polsbanden, onrustbanden).
  - > Waarbij het gebruik van (sederende) medicatie moet verminderen.
  - > Waarbij een rustiger omgeving nodig is, minder prikkels, veiligheid, geborgenheid.
  - > Waarbij een sterke, lichte en prettige VBM omgeving (Vrijheid Beperkende Maatregel) nodig is en toch een VBI (Vrijheid Beperkende Interventie) van het hoogste niveau (niveau 5) wil voorkomen.
  - > Waar Rooming-in niet mogelijk is.
  - > Als een gesloten en veilige omgeving als aangenaam wordt ervaren.
- Verwarde, kwetsbare ouderen met dementie, delier bij opname in het ziekenhuis.
- Personen met de ziekte van Huntington.
- Sommige vormen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
- Ernstig vermagerden.
- Kinderen:
  - > met een verstandelijke beperking,
  - > met een vorm van ASS,
  - > die last hebben van bonken,
  - > met ADHD (en subtype ADD),
  - > die baat hebben bij een rustige, prikkelarme omgeving,
  - > die baat hebben bij een beschutte, afgebakende plek waar ze zich veilig voelen.

CONCEPT

Beoogde gebruiksomgeving (intended use environment)

Toepassingsomgeving 3, 4 en 5 in overeenstemming met IEC 80601-2-52_2026 en, en IEC 80601-2-89_2025 en_fr.

Toepassingsomgeving 3:

Langdurige zorg in een medische omgeving waar medisch toezicht vereist is en, indien nodig, toezicht wordt uitgevoerd, en een medisch bed wordt ingezet bij medische handelingen om de toestand van de patiënt te behouden of te verbeteren.
Opmerking 1. bij dit artikel. Dit betreft verpleeghuizen, verpleegkundig kinderzorghuizen en in revalidatie- en geriatrische instellingen

Toepassingsomgeving 4:

Zorg die wordt verleend in een huiselijke omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van een medisch bed om letsel, handicap of ziekte te verlichten of te compenseren.
Opmerking 1. bij dit artikel: Dit sluit het gebruik in andere toepassingsomgevingen uit (bijv. verpleeghuizen, verpleegkundig kinderzorghuizen, revalidatie -en geriatrische instellingen) wanneer een medisch bed uitsluitend is ontworpen voor toepassingsomgeving 4.

Toepassingsomgeving 5:

Poliklinische zorg of ambulante zorg, die wordt verleend in een ziekenhuis of een andere medische instelling, onder medisch toezicht, waarbij een medisch bed ter beschikking wordt gesteld voor personen met een ziekte, letsel of handicap met het oog op behandeling, diagnose of controle.

Indications

Het Cocoon Tentbed is geschikt voor de volgende situaties.

- Als de kans bestaat dat een patiënt uit een ziekenhuisbed valt of het bed zonder toestemming verlaat, bewust of onbewust.
- Als een patiënt wegloopt of ronddwaalt.
- Als een patiënt onrustig of angstig is, agressief gedrag vertoont, of last heeft van waanideeën en hallucinaties.
- Als een patiënt behoefte heeft aan een veilige, rustige omgeving die de veiligheid en het comfort vergroot.
- Als een patiënt een alternatief voor fixatie nodig heeft.
- Als een patiënt een alternatief voor psychotrope medicatie nodig heeft, of als het onmogelijk is om psychotrope medicatie toe

Contra-indicaties (contraindications)

Het Cocoon Tentbed is niet geschikt voor onderstaand gebruik.

- Personen onder de 3 jaar.
- Operatiekamer, Intensive Care of SpoedEisende Hulp.
- Omgevingen waar zuurstof aan personen wordt toegediend, zoals in een hyperbarische kamer e.d.
- Personen met een diagnose claustrofobisch te zijn of te worden in een kleine afgesloten omgeving.
- Personen met een diagnose voedingsstoornis waarbij niet eetbare voorwerpen worden opgegeten of die gaan sabbelen aan de Cocoon Tent en het matras.
- Personen die gewelddadig zijn of zelfdestructief.
  Zo zou een belanghebbende zich binnenin tegen de tent aan kunnen gooien of van de ene naar de andere kant kunnen swingen. Dat kan resulteren in het kiepen of rollen van het Cocoon Tentbed met alle gevolgen van dien.
- Personen die voortdurend overdwars gaan liggen en met kracht de zijkanten uit elkaar duwen.
- Infuus, sonde, drain en dergelijke.

CONCEPT

Het gebruik van een infuus, katheter, sonde, drain en dergelijke is verboden.

Het gebruik van het Cocoon Tentbed wordt bepaald na multidisciplinair overleg tussen de behandelende professionals, rekening houdend met de wensen van de patiënt en zorgverleners, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ingebruikname

Nadat de getrainde servicetechnicus de eindcontrole heeft gedaan en de verschillende basishandelingen (procedures) en functies van de handbediening met de zorgverlener heeft doorgenomen, dienen onderstaande stappen te worden uitgevoerd.

1. Controleer of het juiste matras in de Cocoon Tent ligt.
2. Breng de van toepassing zijnde matrasovertrek(ken) aan. Dit verschilt per instelling, ziekenhuis en thuisgebruik.
3. Steek de stekker in de wandcontactdoos. Het netsnoer moet onder het bed door naar de wandcontactdoos worden geleid. Het netsnoer mag niet strak staan en niet in de weg liggen.

Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos. Gebruik uitsluitend het standaard netsnoer.

4. Controleer met de handbediening of alle verstellingen werken.

CONCEPT

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk

Er zijn bewegende onderdelen. Er zijn enkele kabels binnen handbereik. Producten die warmte afgeven, kunnen brand en brandwonden veroorzaken.
Elektriciteit in de tent in huiselijke omgeving (AE4) kan zeer gevaarlijk zijn, met name in situaties met een oude stoppenkast zonder aardlekschakelaar. Elektriciteit en water vormen een gevaarlijke combinatie.
Scherpe voorwerpen kunnen de gesloten Cocoon Tent beschadigen, waardoor deze zijn functionaliteit verliest.
En kijk uit voor de stelpoten.



Tijdens het bedienen van het Cocoon Tentbed mogen zich geen personen of huisdieren onder het bed of in de nabijheid van de bewegende delen van het Cocoon Tentbed bevinden.



Plaats het Cocoon Tentbed op enige afstand van muren, meubels en andere voorwerpen in de buurt, zodat de patiënt er niet mee in aanraking kan komen. Dit helpt het risico op letsel te verminderen en verkleint de kans dat het Cocoon Tentbed kantelt als de patiënt tegen de muur drukt.



Het netsnoer en de kabel van de handbediening mogen niet bekneld raken of knikken. Dit kan leiden tot beschadiging of storingen en kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken.



Warmte genererende producten zoals sigaretten, aanstekers, kaarsen, sfeerverlichting, wierookstokjes, felle gloeilampen en apparaten zoals strijkijzers en haardrogers zijn niet toegestaan in de Cocoon Tent.



Elektriciteit is niet toegestaan in de Cocoon Tent.

Het moet duidelijk zijn dat scherpe voorwerpen het Cocoon Tentbed kunnen beschadigen. Als hierdoor een opening in de Cocoon Tent ontstaat, leidt dit tot aanzienlijk ongemak en wordt de bescherming die de Cocoon Tent biedt aangetast.
Daarom geldt de volgende waarschuwing:



Scherpe nagels zijn niet toegestaan. Zowel aan de handen als de voeten. Verwijder elk scherp object uit de Cocoon Tent waarmee het tentdoek of het gaasdoek kan worden beschadigd.

De stelpotem zijn zo afgesteld dat, wanneer het tentbed in de laagste stand staat, het tentbed enkele centimeters omhoog komt, waardoor de zwenkwielen van de grond komen.
De laatste 4 tot 5 cm tot aan de grond verlopen langzaam.
Het moet duidelijk zijn dat bij het laten zakken van het tentbed naar de laagste stand er geen voet onder de verstelbare poten mag worden geplaatst. Dit kan letsel veroorzaken.

Daarom geldt de volgende waarschuwing:



Let erop dat er geen voet onder een stelpoot komt terwijl het Cocoon Tentbed naar beneden beweegt. Zie de afbeeldingen 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15 en 18.

CONCEPT

Bediening van het Cocoon Tentbed

Het Cocoon Tentbed heeft een elektrisch aandrijfsysteem. Het Cocoon Tentbed wordt met de handbediening aangestuurd. De functie van de bedieningstoetsen en led's (**groen**, **oranje**) staat beschreven in de tabel op de volgende bladzijde.

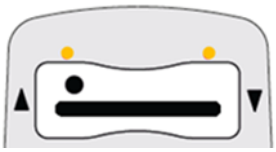


Bedieningstoetsen

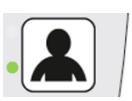
Alleen medisch personeel of zorgverleners mogen de handbediening gebruiken.
Er wordt een “LINAK tag“ gebruikt om de handbediening te (de-)activeren.

1. Beweeg de LINAK tag in  het gestippelde gebied over de handbediening.
2. Druk 2x kort op de Aan/Uit toets.
   De twee groene led’s gaan knipperen. 

   Als niet binnen 30 seconden na het taggen de toets ingedrukt wordt, gaat het systeem uit.
3. De Hoog-Laag positie en indien geactiveerd de Hoofd Naar Beneden Kantelen en Voet Naar Beneden Kantelen positie kan nu ingesteld worden.

4. Als de handbediening 30 seconden niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch UIT.
5. Handbediening is ook uit te schakelen door:
   - 1x op de Aan/Uit toets te drukken
   - de LINAK tag te gebruiken

Bedieningstoetsen	Functie	Werking
	Hoog-Laagverstelling	Met de toetsen kan de Cocoon Tentbed omhoog of omlaag gezet worden. Als het systeem is aangezet, branden beide led’s. Dat betekent dat de Hoog-Laagverstelling actief is. Het systeem stopt op de zogenaamde tillift hoogte (15 cm), zodat u de patiënt kunt optillen. Druk nogmaals om door te gaan.
	Hoofd Naar Beneden Kantelen (AE3,5) Voet Naar Beneden Kantelen (AE3,4,5)	Als deze functie door de getrainde servicetechnicus is geactiveerd, branden bij het aanzetten van het systeem beide led’s. Voet Naar Beneden Kantelen is de linkertoets, Hoofd Naar Beneden Kantelen is de rechtertoets.
	Aan/Uit toets	Na het activeren van de handbediening met de LINAK tag kan het systeem aangezet worden. Aan: 2x snel drukken Uit: 1x drukken Zolang de twee led’s knipperen kan het systeem aangezet worden. Wordt dit niet gedaan, dan gaan de led’s na ca. 30 seconden uit. De verpleegkundige led en de led’s van de geactiveerde verstellingen blijven dan nog ca. 1 minuut branden en gaan dan ook uit.
	Verpleegkundige toets. Hiermee kunnen verschillende opties geprogrammeerd worden.	Deze toets wordt door de getrainde servicetechnicus gebruikt om bepaalde instellingen te activeren. Bijvoorbeeld om Hoofd Naar Beneden Kantelen / Voet Naar Beneden Kantelen knoppen te activeren. Als het systeem is aangezet, brandt deze led. Als het systeem wordt uitgezet gaat deze led uit.

CONCEPT

Als de handbediening niet wordt gebruikt, kan hij aan de zijkant van de tent worden gehangen, hetzij links, hetzij rechts.

Het gebruik van het Cocoon Tentbed

Oefen voordat het Cocoon Tentbed in gebruik wordt genomen alle handelingen met een of meerdere personen om vertrouwd te raken met het systeem.
Het Cocoon Tentbed kan met één hand worden bediend. Overleg altijd vooraf met de patient/client welke handelingen zullen worden uitgevoerd om schrikreacties te voorkomen.

Basissituaties

Situatie zonder toezicht

In een situatie zonder toezicht moet het Cocoon Tentbed in een veilige stand staan. Die stand wordt verkregen door alle zwenkwielen op de rem te zetten, de toegangspanelen dicht te ritsen, de schuiver met de klikgesp vast te zetten en het Cocoon Tentbed in de laagste positie te zetten.
Let erop dat de onderste van de twee schuivers met de klikgesp is vastgezet.

Situatie zonder toezicht:
- *Alle vier de zwenkwielen op de rem.*
- *Toegangspaneel aan voor- en achterkant dichtgeritst en onderste schuiver met klikgesp vastgemaakt.*
- *Het Cocoon Tentbed in de laagste stand.*
- *De stelpoten staan dan op de grond en de zwenkwielen staan wat los van de grond.*

Er is sprake van een situatie zonder toezicht als de patiënt/cliënt overdag of ’s nachts alleen wordt gelaten (de medisch professional heeft na een risicobeoordeling vastgesteld dat dit veilig kan).

Situatie met toezicht

In de situatie met toezicht kunnen medische en/of verzorgende handelingen worden uitgevoerd. Ook kan hulp worden geboden bij Algemeen Dagelijkse Levenshandelingen (ADL) of bij het verplaatsen van patiënten. Het toegangspaneel aan de voor- en/of achterkant kan gedeeltelijk (bv. de helft) of geheel geopend zijn.

Op twee manieren kan een gedeeltelijke opening worden gemaakt. Eerst moet er een rits geheel naar links en een geheel naar rechts worden geschoven.
Als de gedeeltelijke opening links gewenst wordt pak dan halverwege de linkerkant van het toegangspaneel de klikgesp en steek die in het andere deel van de klikgesp linksboven.
Als de gedeeltelijke opening rechts gewenst wordt pak dan halverwege de rechterkant van het toegangspaneel de klikgesp en steek die in het andere deel van de klikgesp rechtsboven.

Als een gehele opening gewenst wordt pak dan halverwege de linkerkant van het toegangspaneel de klikgesp en steek die in het andere deel aan de linkerkant en doe dat ook zo aan de rechterkant.

De hoogte kan worden aangepast om het verplegend personeel een verantwoorde werkhouding te bieden. Het bed kan ingesteld worden tussen van 24 en 84 cm, en met een matras van 10 cm kan de hoogte worden aangepast tussen 34 en 94 cm. Zo kan elke hulpverlener de ideale werkhoogte instellen.

Situatie met toezicht:
- *Het Cocoon Tentbed kan eventueel naar een andere positie worden verplaatst..*
- *Alle vier de zwenkwielen op de rem.*
- *Cocoon Tentbed op werkhoogte instellen.*
- *Toegangspaneel aan voor- en/of achterkant met behulp van een klikgesp aan de Cocoon Tent bevestigd.*

CONCEPT

Als een toegangspaneel open staat, moet er een zorgverlener aanwezig te zijn. Tijdens het verplaatsen moet er een zorgverlener aan de kant van het geopende toegangspaneel staan.

De toegangspanelen, ritssluitingen, klikgespen en zwenkwielen

De verpleging kan gebruik maken van het toegangspaneel aan de voor- en, indien aanwezig, de achterkant van het Cocoon Tentbed.

De ritssluiting is voorzien van een dubbele schuiver. Hiermee kun je een gesloten toegangspaneel blokkeren tegen openen van binnenuit. Het maakt het ook mogelijk om het toegangspaneel gedeeltelijk aan de linker- of rechterkant op te hangen, maar ook om het toegangspaneel geheel op te hangen.

De onderste van de twee schuivers van de ritssluiting kan aan beide kanten het toegangspaneel blokkeren tegen openen van binnen uit.

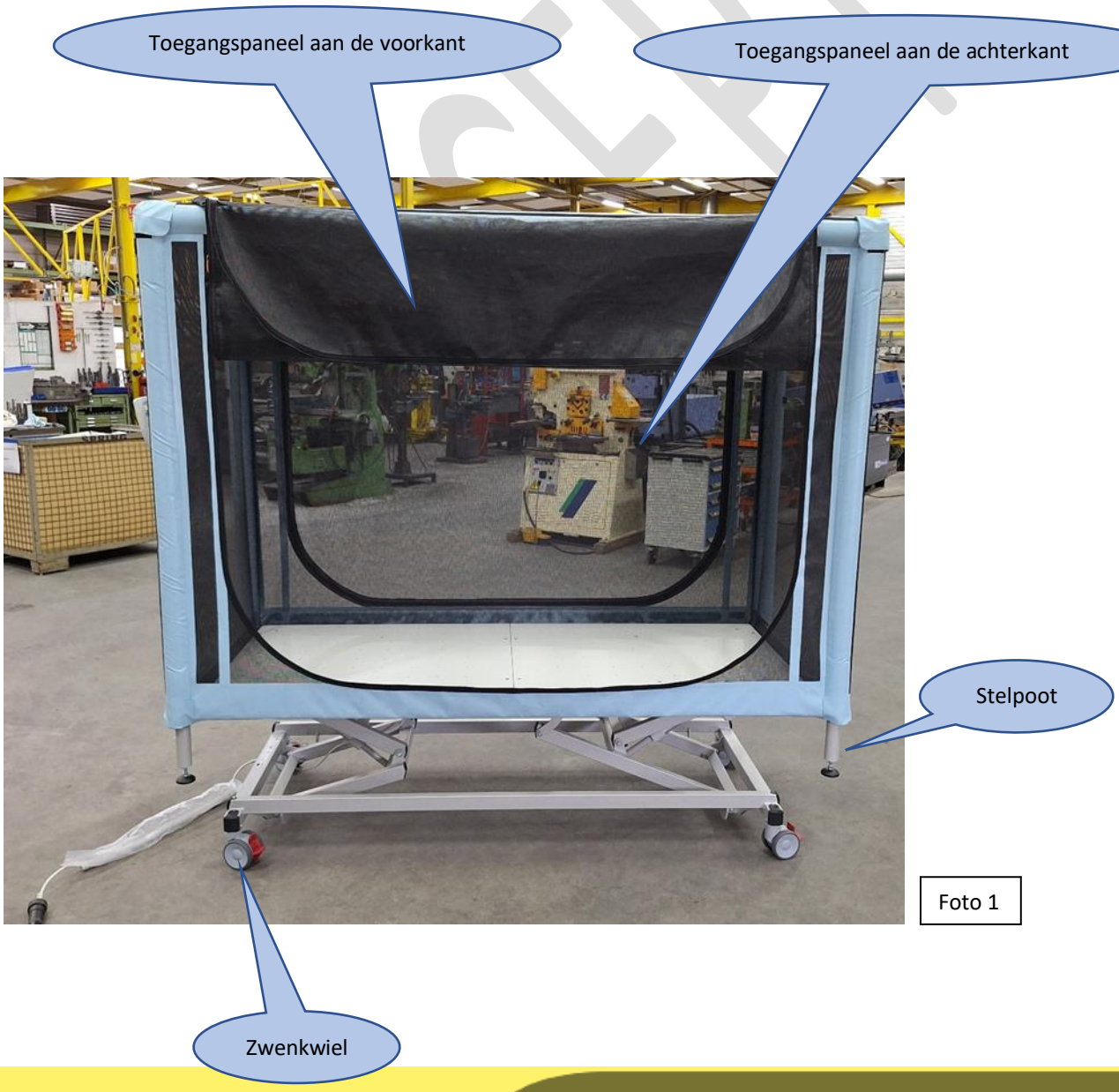


Foto 1

Werking toegangspaneel voorkant, rechts.

Toegangspaneel voorkant gedeeltelijk openen, rechts.



Onderste schuiver met klikgesp verbonden

Schuivers aan de rechterkant

Foto 2



Onderste schuiver van klikgesp losgemaakt

Foto 3



Foto 4

Gedeeltelijk geopend toegangspaneel voorkant, opgehangen met de klikgesp aan de rechterkant



Foto 5

Het toegangspaneel voorkant met de onderste schuiver verder opengemaakt

Werking toegangspaneel voorkant, links.

Toegangspaneel voorkant gedeeltelijk openen, links.



Onderste schuiver met klikgesp verbonden

Schuivers aan de linkerkant

Foto 6

Gedeeltelijk geopend toegangspaneel voorkant, opgehangen met de klikgesp aan de linkerkant



Foto 8



Foto 7

Onderste schuiver van klikgesp losgemaakt en al wat naar beneden geschoven

Werking toegangspaneel voorkant.

Toegangspaneel voorkant geheel geopend.

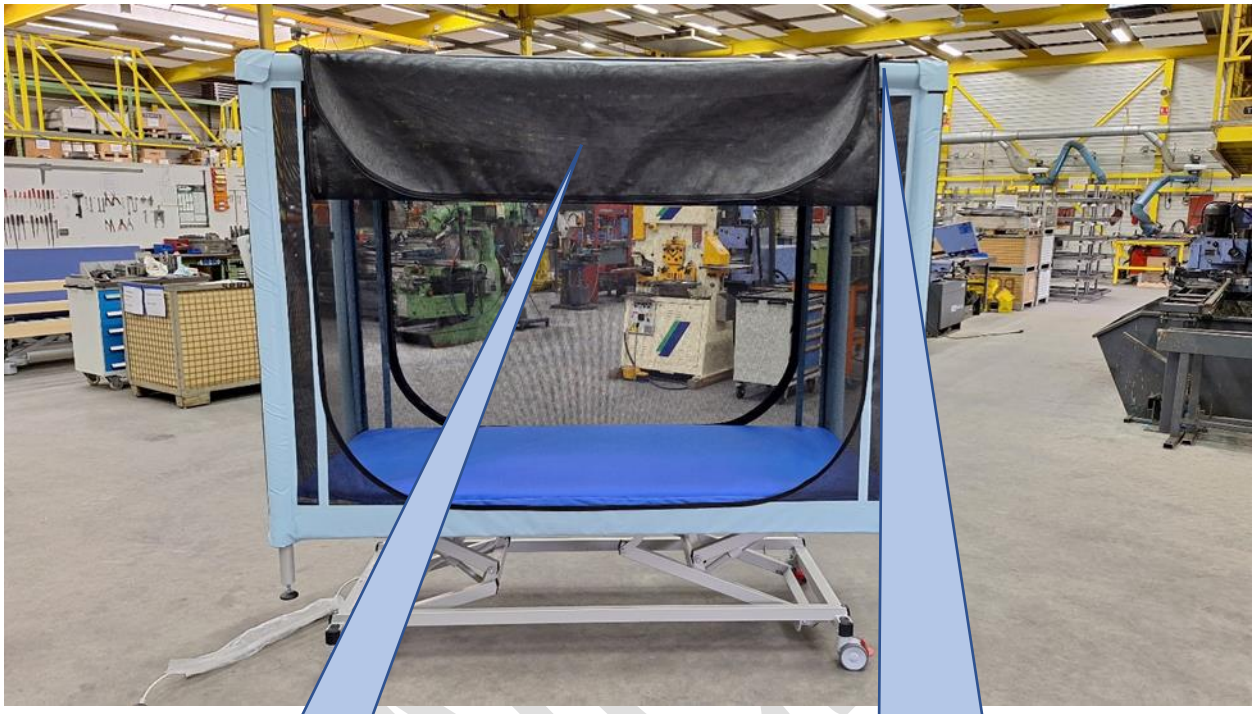


Foto 9

Werking zwenkwiel

Zwenkwiel ongeremd



Foto 10

Zwenkwiel op de rem



Foto 11

De stelpoten in laagste stand (zwenkwiel van de grond)



Foto 12

CONCEPT

Onderdelen benaming

Cocoon Tentbed zonder Cocoon Tent.

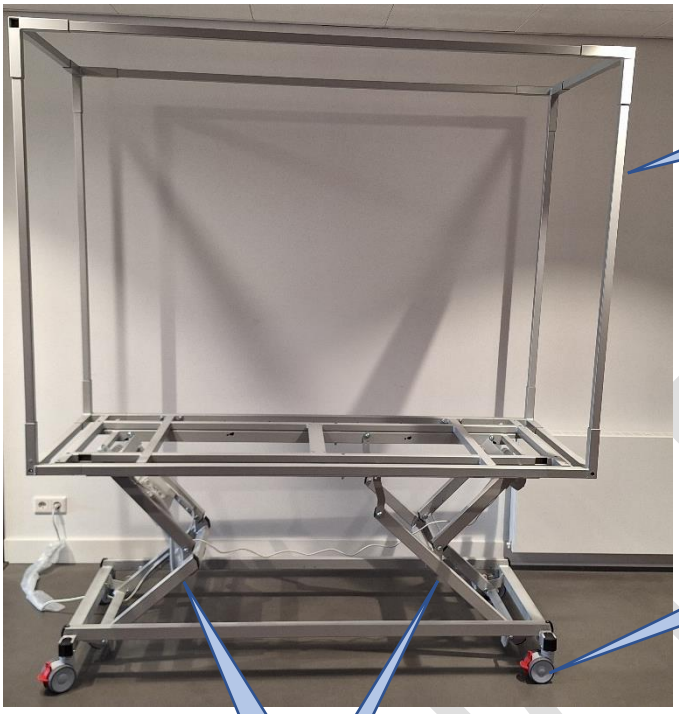


Foto 13

Cocoon Tentbed met Cocoon Tent



Foto 14

CONCEPT

Cocoon Tentbed, zijkant, bodemplaat, rits tentframe.

Ophangpunten handbediening aan de zijkant.
Bodemplaten.
Schuivers rits tentframe.



Foto 15



Foto 16



Foto 17

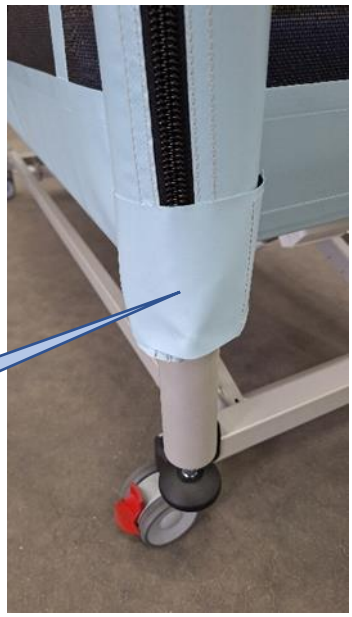


Foto 18

Cocoon Tentbed, bovenaanzicht



Foto 19

CONCEPT

Zorghandelingen

In en uit bed gaan

Met de functie hoog-laag kan een patiënt/cliënt gemakkelijk op een geschikte hoogte in en uit bed stappen.

Stel eerst het bed in op de gewenste hoogte. Rits het toegangspaneel aan de voorkant open en hang het gaasdoek met de klikgesp op. De patiënt/cliënt kan nu, indien nodig met begeleiding, uit bed gaan..

Zodra de patiënt/cliënt weer in bed is, moet het toegangspaneel dichtgeritst worden (beide schuivers bevinden zich dan aan één kant) en de klikgesp wordt met de onderste schuiver verbonden.

Aan- en uitkleden

Let erop dat bij het aankleden van de patiënt alle benodigde kledingstukken op het bed liggen zodat er geen onveilige situatie ontstaat door extra kledingstukken te gaan halen terwijl het voorpaneel open staat.

Nachtrust (dagrust)

Slapen of rusten dient te gebeuren in de laagste stand van het Cocoon Tentbed met de toegangspanelen gesloten en vergrendeld.

Afsluiten van een zorghandeling

Aan het eind van een zorghandeling moet het toegangspaneel aan de voor- en/of achterkant worden gesloten en de onderste schuiver worden vastgezet!
Als er toch wordt besloten een toegangspaneel open te laten, doe dat dan alleen in de laagste stand van het bed. Als door de beweeglijkheid van de patiënt/cliënt de mogelijkheid bestaat dat hij/zij uit bed rolt, leg dan een matras voor de open kant.
Als er dan nog steeds gevaar bestaat, sluit dan het toegangspaneel en zet dan de onderste schuiver vast.

Uit bed rollen

Bij een matras vanaf een dikte van 8 cm zal de bovenkant van het matras gelijk, dan wel boven de ritssluiting van het toegangspaneel uitkomen.
De kans op uit bed vallen bij een open toegangspaneel is dan heel groot. Sluit daarom het toegangspaneel en zet de onderste schuiver vast.

CONCEPT

Problemen oplossen

Probleem	Controleer	Oplossing
Het Cocoon Tentbed reageert niet op de handbediening	Controleer of de stekker van het Cocoon Tentbed in de contactdoos zit.	Als dit niet zo is, druk de stekker dan in de contactdoos.
	Als de stekker van het Cocoon Tentbed in de contactdoos zit.	Als handbediening niet werkt, controleer dan met een lamp of een ander elektrisch apparaat of er spanning op de contactdoos aanwezig is.
		Als de lamp niet brandt of als het apparaat niet werkt, controleer dan in de meterkast of er misschien een zekering is gesprongen of dat er een aardlekschakelaar is uitgevallen. Vervang indien nodig de zekering of reset de aardlekschakelaar.
		Als handbediening nog niet werkt, neem dan contact op met de distributeur en meld de aard van het probleem.
Het Cocoon Tentbed wil niet omhoog		Neem contact op met de distributeur en meld de aard van het probleem.
Het Cocoon Tentbed wil niet omlaag		Neem contact op met de distributeur en meld de aard van het probleem.
Hoofd Naar Beneden Kantelen werkt niet		Neem contact op met de distributeur en meld de aard van het probleem.
Als er een storing in het elektronische systeem optreedt, klinkt er een geluidssignaal uit de controlebox. Dit geluidssignaal heeft verschillende patronen voor verschillende storingen.	Wat is het patroon van het geluidssignaal?	Neem contact op met de distributeur en geef de aard van het probleem en het soort signaal door.
Terwijl het Cocoon Tentbed op en neer wordt bewogen, reageert de motor plotseling niet meer	Is de motor continu gebruikt zonder rustperiode? Zo ja, dan is de 10%-duty cycle (2 minuten AAN en 18 minuten UIT) niet in acht genomen.	De motor en de controlebox zijn te heet geworden. Nadat het systeem een tijdje is afgekoeld, zal het weer functioneren. Zo niet, neem dan contact op met de distributeur.

CONCEPT

Onderhoud, controles, levensduur, garantie

Onderhoud.

Schoonmaken, reinigen, desinfecteren.

Wassen en reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil. Reinigen gaat grondiger en is bedoeld voor dieper zittend vuil, vet en bacteriën. Na het wassen of reinigen is desinfectie noodzakelijk.
Vuil is een broedplaats voor ziekteverwekkers. Door vuil te verwijderen, wordt voorkomen dat micro-organismen zich vermenigvuldigen of verspreiden.
Desinfecteren is het doden of inactiveren van ziekteverwekkende organismen, zoals bacteriën en virussen. Door micro-organismen te bestrijden, kunnen ze zich niet verder verspreiden.
Het verschil is dus dat bij reinigen de voedingsbodem voor ziekteverwekkers wordt verwijderd en bij desinfecteren de ziekteverwekkende organismen worden gedood.

Het Cocoon Tentbed bestaat uit vier afzonderlijke delen: het onderstel (inclusief de elektronica), het tentframe, de Cocoon Tent en het matras. De Cocoon Tent bestaat voornamelijk uit gaasdoek, tentdoek, ritsen en klikgespsluitingen.

De Cocoon Tent.

Om de Cocoon Tent voor een nieuwe gebruiker in te zetten, moet de was- of reinigings- en desinfectieprocedure worden gevolgd. Maar ook als de Cocoon Tent door slechts één persoon wordt gebruikt, moet de procedure worden gevolgd in geval van o.a. besmetting.

Het volgende geldt zowel voor het tentdoek als voor het gaasdoek.

Er zijn restricties voor het reinigen en desinfecteren van de tentdoeken (kunststoffen met een PVC- coating).
Absoluut verboden alle soorten schuurmiddelen: poeders, pasta's, vloeistoffen, schuursponzen, harde borstels, schrobborstels, hogedrukreiniging met stoom en hogedrukreiniging met water.
Ook verboden is het gebruik van organische chemicaliën zoals aceton, benzine, benzeen, stookolie, kerosine, perchloorethyleen, terpentijn, tolueen, trichloorethyleen, petroleum, THF, ethylacetaat, waterstofperoxide, enz.
En het gebruik van anorganische chemicaliën zoals ammoniak, salpeterzuur, zwavelzuur, azijnzuur, zoutzuur, soda, natriumhydroxide, bleekwater, enz. is ook verboden.

Gebruik voor het schoonmaken een microvezeldoek en een allesreiniger (niet-agressief). De maximale temperatuur bedraagt 40 °C.

Als het om lichaamsvocht gaat zoals zweet, braaksel, urine, bloed en feces zal het schoonmaken intensiever zijn, meer naar reinigen gaan. Er moet dan intensiever worden schoongemaakt.

Het wordt aanbevolen om na het schoonmaken te desinfecteren.
Desinfecteren wordt ook aanbevolen in het geval van (mogelijke) besmetting. Volgens de WIP-richtlijnen moet dit bij besmetting met bloed of lichaamsvloeistoffen en bij besmettelijke ziekten gebeuren met 70% alcohol.

Het matras.
De Cocoon Tent matras valt onder de verantwoordelijkheid van de matras fabrikant.
De naam van de fabrikant, de naam van de matras en een link naar de website van de fabrikant zijn te vinden op de website van Spring Produkties B.V.: (https://spring-produkties.nl), Producten, Cocoon Tentbed, Cocoon Tent-matras.

Het gebruik van andere matrassen is niet toegestaan.

CONCEPT

Onderhoud door zorgverlener.

Onderdeel	Wat	Opmerking	Voor gebruik	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks
Tentdoek	Binnen- en buitenkant	Microvezeldoek en een allesreiniger (niet agressief).				
Gaasdoek	Binnen- en buitenkant	Microvezeldoek en een allesreiniger (niet agressief).				
Handbediening	In het geheel	Microvezeldoek en een allesreiniger (niet agressief).				
Klikgesp sluitingen	Beide delen	Microvezeldoek en een allesreiniger (niet agressief).				
Ritssluiting	Rits en schuiver	Microvezeldoek en een allesreiniger (niet agressief).				
Matras	Matras(kern + tijk) Incontinentiehoes	Zie informatie matrasfabrikant				

Het onderhoud door de zorgverlener bestaat uit het periodiek licht vochtig reinigen van alle onderdelen waarmee contact wordt gemaakt. Gebruik een reinigingsmiddel zonder alcohol, schuurmiddel, chloor of andere agressieve stoffen.

Het tentdoek wordt als vuil beschouwd indien het duidelijke en blijvende vervuiling vertoont. Het tentdoek is bestendig tegen vervuilende invloeden door de gladde textuur en de coating (deze bevat een anti-aanhecht middel).

Onderhoud door technische dienst.

Onderdeel	Wat	Opmerking	Voor gebruik	Dagelijks	Jaarlijks	Na eigen expertise
Scharnierpunten	Piepen ze? Lopen ze stram?	Bij piepen, stramheid, smeren met smeermiddel op Teflon basis.				
Zwenkwielen	Zijn ze nog heel? Rollen ze goed? Gaan ze goed op de rem?	Besluiten te vervangen.				
Handbediening	Beschadigingen?	Besluiten te vervangen.				
Klikgesp sluitingen	Beide delen! Zit het goed vast aan het tentbed? Is de klemming nog oké?	Zo niet, contact opnemen met de distributeur.				
Ritssluiting	Rits en schuiver Ziet het er goed uit? Loopt de schuiver goed/soepel?	Zo niet, contact opnemen met de distributeur				

CONCEPT



Het Cocoon Tentbed mag niet in een wasstraat en gebruik geen hogedrukspuit of stoomreiniger



Schakel het systeem tijdens onderhoud uit. Tijdens onderhoud mag er niemand in de Cocoon Tent zijn.



De maximale temperatuur waarmee het tentdoek en gaasdoek behandelt mag worden is 40°C.

Controles

Controles door zorgverlener.
Deze controles uitvoeren i.v.m. de veiligheid van de patiënt/cliënt.

Onderdeel	Handeling	Opmerking	Voor gebruik	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks
Netsnoer	Controleer op beschadigingen	Als het netsnoer beschadigd is, neem dan direct contact op met de distributeur.	■			
Handbediening	Controleer op beschadigingen	Als de handbediening beschadigd is of niet goed werkt, neem dan direct contact op met de distributeur.	■			
	Controleer op een juiste werking		■			
Tentdoek	Controleer op beschadigingen	Neem direct contact op met de distributeur als het tentdoek beschadigd is.		■		
Gaasdoek	Controleer op beschadigingen	Neem direct contact op met de distributeur als het gaasdoek beschadigd is.		■		
Matras	Controleer op beschadigingen	Incontinentiehoes (weefsel en ritssluiting). Matras (kern + tijk). Neem direct contact op met de distributeur als de incontinentiehoes of matras beschadigd is.		■		
Klikgesp sluitingen	Controleer op een juiste werking	Bij een juiste werking kan de ritssluiting niet worden geopend. Neem direct contact op met de distributeur als de klikgesp sluiting van voor- of achterkant niet juist functioneert (de schuiver niet blokkeert).		■		
Ritssluiting	Controleer op soepel lopen	Neem direct contact op met de distributeur als de ritssluiting, schuiver stroef loopt.		■		

Er zijn routinecontroles die geen verband houden met de dagelijkse patiëntveiligheid.

Regelmatige inspectie van het tentdoek en het gaasdoek.
- Controleer op scheuren langs de randen en aan de binnenkant van het toegangspaneel.
- Controleer of er losse lasnaden zijn.
- Controleer of er dikke afzettingen op het oppervlak zitten.

Specifieke controle van tentdoek en gaasdoek.
- Voer de controle uit nadat er vreemde, harde, scherpe of schurende voorwerpen op het doek zijn gevallen.

CONCEPT

Levensduur

Het volgen van het onderhoud verlengt de levensduur van het Cocoon Tentbed. Ook blijft de kwaliteit beter behouden. Uiteraard is de intensiteit van het gebruik ook bepalend voor de levensduur.

De technische levensduur van het hoog-laag-systeem + tentframe bedraagt 10 jaar.
De technische levensduur van de Cocoon Tent bedraagt 5 jaar.
Voor de technische levensduur van het matras, See Website Spring Produkties B.V.: : https://spring-produkties.nl, Producten, Cocoon Tentbed, Cocoon Tent mattress.

Het is belangrijk dat een opgeleide servicetechnicus het systeem jaarlijks controleert en inspecteert. De staat van het systeem kan dan ook worden besproken, met advies voor de toekomst.

Garantie

Spring Produkties B.V. verleent garantie op gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, oneigenlijk gebruik, onjuist onderhoud, of die ontstaan na aanpassing of reparatie door of namens de klant zelf of door derden, vallen niet onder de garantie. Gevolgschade wordt niet vergoed.

De garantieperiode gaat in op de leveringsdatum.

Garantie op het Cocoon Tentbed bij normaal gebruik:

High-low-systeem + tentframe	5 jaar
Oppervlaktebehandeling (poedercoating)	4 jaar
Elektrische componenten	2 jaar
Cocoon Tent	2 jaar
Matras	Zie Website Spring Produkties B.V.: https://spring-produkties.nl, Producten, Cocoon Tentbed, pdf Cocoon Tent mattress.

Klachten en medische incidenten

Neem bij klachten contact op met de distributeur.
Ernstige incidenten met betrekking tot het apparaat moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van het land.

Buiten bedrijf stellen

Het Cocoon Tentbed is buiten bedrijf te stellen door de stekker uit het stopcontact te halen.

Trek de stekker uit het stopcontact als de Cocoon Tentbed wordt verplaatst anders kan het netsnoer onherstelbaar beschadigd raken..

Om het systeem weer in bedrijf te stellen, raadpleeg het hoofdstuk "*Ingebruikname*".

CONCEPT

Technische specificaties

Mechanisch

Ligvlak	Bodemplaten
Laagste stand (bovenkant ligvlak)	240 mm
Hoogste stand (bovenkant ligvlak)	840 mm
Hoogteverstelling	600 mm
Tentbed afmetingen inwendig	200 x 90 x 145 cm
Tentbed afmetingen uitwendig	215 x 92 x 150 cm
Totaal gewicht	143 kg (zonder matras)
Gewicht tentframe (met bodemplaten)	56,6 ((35 + 21,6) kg
Gewicht tent	7,34 kg
Veilige WerkLast (SWL)	300 kg
AE3,5	Head and Foot Down Tilt max. 6°
AE4	Foot Down Tilt max. 6°
Maximaal persoons gewicht	175 kg
Matras	20 kg max.
Gebruikstemperatuur	5 °C ≤ T ≤ 40 °C
Opslag	-10 °C ≤ T ≤ 50 °C, 20% ≤ RV ≤ 80% (zonder condensatie)

Elektrische besturing

Ingangsspanning Controle box	100-240 Vac 50/60 Hz
Elektrische bescherming	Klasse II
Beschermingsgraad	IPx6
Inschakelduur	10% - 2/18 min. On/Off (continu bedrijf)

Motoren

Ingangsspanning	24 Vdc (standaard) 33 Vdc (HP)
Druk- en trekkracht motoren hoog/laag	8000 N /stuk (815,5 kg), 2000 N
Geluidsniveau	< 50 dB
Beschermingsgraad	IPx6
Inschakelduur	10% - 2/18 min. On/Off (continu bedrijf)

Handbediening

Beschermingsgraad	IPx4

Matras

Cocoon Tent mattress Voor kinderen en volwassenen	Zie Website Spring Produkties B.V.: : https://spring-produkties.nl, Producten, Cocoon Tentbed, Cocoon Tent matras.
	- Naam van het matras
	- Fabrikant
	- Site link
	- Informatie over het matras (gebruik, verzorging, reiniging, wassen van de kern en de incontinentiehoes.

CONCEPT

Cocoon Tent materialen

Tentdoek	
Samenstelling (composiet, membrane)	100% recycled PET yarns / Coating PVC
Andere eigenschappen	Waterdicht, bestand tegen UV-straling, PFAS-vrij
Garantie	2 jaar
Gaasdoek	
Samenstelling	100% PES / 1100 dtex / Coating PVC
Andere kenmerken	UV-bestendigheid
Garantie	2 jaar

CONCEPT

Contactinformatie

Fabrikant
Spring Produkties B.V.
Gaffel 19
3891 KC ZEEWOLDE
Nederland
Telefoon: +31 (0)36 522 74 87 (behalve tussen 12.00 en 12.30 uur)
E-mail: info@spring-produkties.nl
Website: https://spring-produkties.nl/

CONCEPT